

オンライン請求システム接続可能回線の追加について

平成 26 年 10 月 21 日から、オンライン請求システムの IP-VPN 接続可能回線に以下のサービスを追加することといたしました。

当該サービスについては、無線 LAN 機能が標準で搭載されている機器を使用することから、厚生労働省が示している「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に適合させるため、別紙「無線 LAN セキュリティ設定手順書」による設定を必ず行っていただき、セキュリティ等に留意し、システム利用者の責任において利用願います。

- 1 回線事業者
N T T 東日本
- 2 回線種別
フレッツ光ネクスト
- 3 サービス名
 - (1) ギガファミリー・スマートタイプ
 - (2) ギガマンション・スマートタイプ

設定手順等ご不明な点につきましては、こちらへお問い合わせください。

ネットワークサポートデスク (0120-220-571)

9時から17時(土日祝及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

5日から7日は8時から21時まで、8日から10日は8時から24時(土日祝含む。)

【オンライン請求ネットワーク】

フレッツ光ネクスト ギガファミリー/
ギガマンション・スマートタイプ用ホームゲートウェイ

無線 LAN セキュリティ設定手順書

平成 26 年 10 月版

社会保険診療報酬支払基金
都道府県国民健康保険団体連合会

目次

	はじめに.....	P3
1	無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)を設定する.....	P5
2	MACアドレスフィルタリングの設定をする.....	P6
3	《推奨する対策》 DHCP機能をOFFにする.....	P9
4	《推奨する対策》 SSIDを変更する.....	P12
5	《推奨する対策》 SSIDのパスワードを設定する.....	P13

はじめに

フレッツ光ネクスト・ギガファミリーまたはギガマンション・スマート回線を用いてオンライン請求ネットワークをご利用する場合は、ホームゲートウェイの無線カードを取り外し、有線接続にてご利用ください。お客様のネットワーク環境のご都合により、無線 LAN 環境にてご利用となる場合は、お客様自身でパソコンの無線 LAN 設定を行っていただいた上で「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づくセキュリティ設定を行うことが必要となります。ガイドラインを遵守し、安全にご利用いただくために必ず本手順書に従ってホームゲートウェイのセキュリティ設定を行ってください。

また、《推奨する設定》(P9.項番 3 以降)につきましても、お客様のネットワーク環境上不都合のない限り極力実施ください。

なお、ガイドライン内容と本書との関連につきましては、以下の表をご参照ください。

表 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 対応一覧」

No	最低限のガイドライン	対応する設定手順
1-1	利用者以外に無線 LAN の利用を特定されないようにすること。例えば、ステルスモード、ANY 接続拒否等の対策をとること。	1. 無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY 接続拒否)を設定する
1-2	不正アクセスの対策を施すこと。 少なくとも SSID や MAC アドレスによるアクセス制限を行うこと。	2. MAC アドレスフィルタリングの設定をする 4. 《推奨する対策》 SSID を変更する 5. 《推奨する対策》 SSID のパスワードを設定する SSID のパスワードはデフォルトで設定あり。
1-3	不正な情報の取得を防止すること。例えば WPA2/AES 等により、通信を暗号化し情報を保護すること。	設定不要 (ホームゲートウェイの初期設定値が WPA2/AES であるため)
1-4	電波を発する機器(携帯ゲーム機等)によって電波干渉が起こり得るため、医療機関等の施設内で利用可能とする場合には留意すること。	設定不要 (セキュリティ面の要件ではないため)
1-5	無線 LAN の適用に関しては、総務省発行の「安心して無線 LAN を利用するために」を参考にすること。	設定不要 (No1-1~1-4 の設定及び 2-1 の対策を行うことで遵守可能であるため)
No	推奨されるガイドライン	対策
2-1	無線 LAN のアクセスポイントを複数設置して運用する場合等は、マネジメントの複雑さが増し、侵入の危険性が高まることもある。そのような侵入のリスクが高まるような設置をする場合、例えば 802.1x や電子証明書を組み合わせたセキュリティ強化をすること。	オンライン請求ネットワークをご利用の場合、ホームゲートウェイ以外に無線 LAN のアクセスポイントを設置しないでください。

設定手順等ご不明な点につきましては、こちらへお問合せください。

ネットワークサポートデスク (0120-220-571)

9時から17時(土日祝及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

5日から7日は8時から21時まで、8日から10日は8時から24時(土日祝含む。)

あらかじめ以下の手順でホームゲートウェイの設定画面を開いてください。


1. ホームゲートウェイと設定端末を有線で接続します。

以降の手順は全て有線で接続した状態で行ってください。


2. ブラウザを起動します。

3. IP アドレス(192.168.1.1)を入力します。

アドレスを変更している場合は、ホームゲートウェイのアドレスを入力してください。

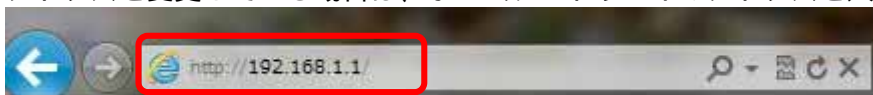


4. 機器設定用パスワードを入力します。

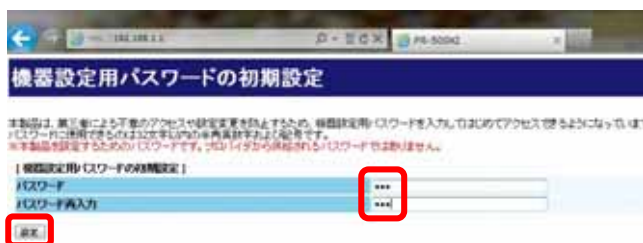


5. 設定画面を開きます。

利用タイプの選択で、「インターネット接続先を設定しない」にチェックを入れて、下の「設定」をクリックします。

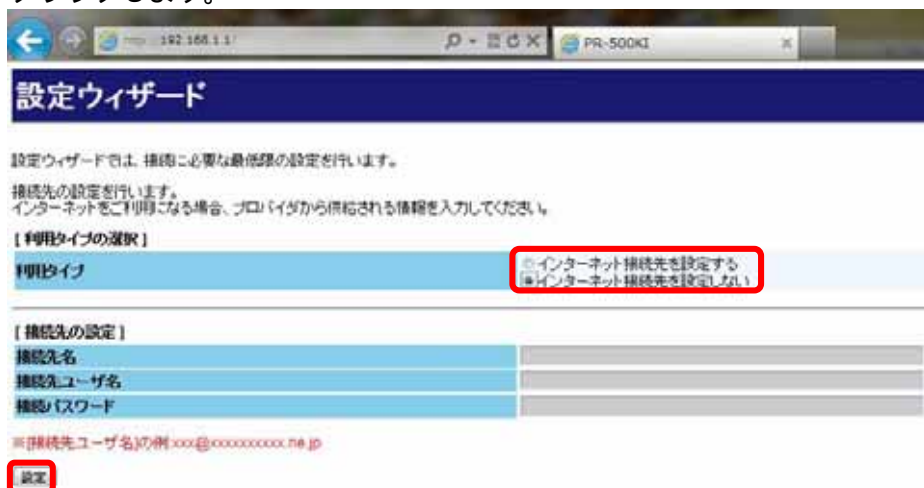


1. 「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY 接続拒否)」を設定する

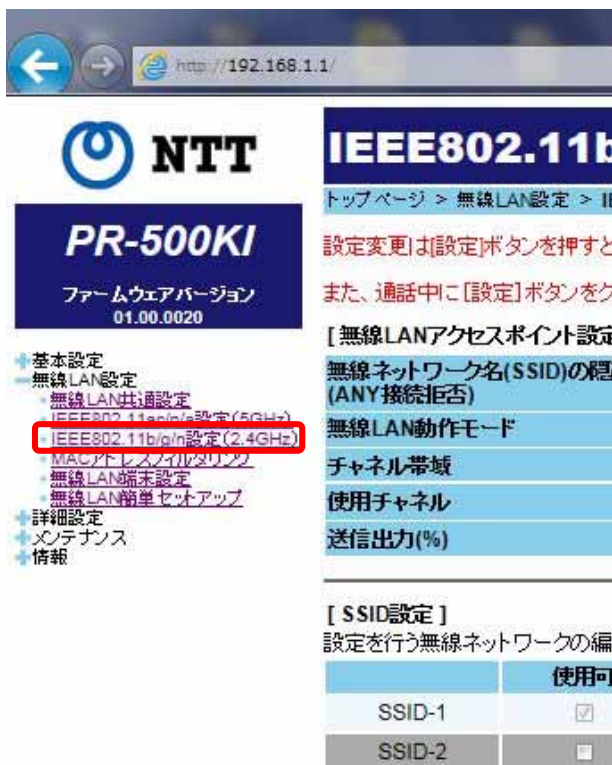

1. 「IEEE802.11b/g/n 設定(2.4GHz)」画面を開きます。

左メニューの「無線 LAN 設定」から「IEEE802.11b/g/n 設定(2.4GHz)」を選択し、「IEEE802.11b/g/n 設定(2.4GHz)」画面を開きます。

本手順書は、2.4GHz を利用の場合を例として記載しています。5GHz を利用の場合は「IEEE802.11ac/n/a 設定(5GHz)」を開いてください。

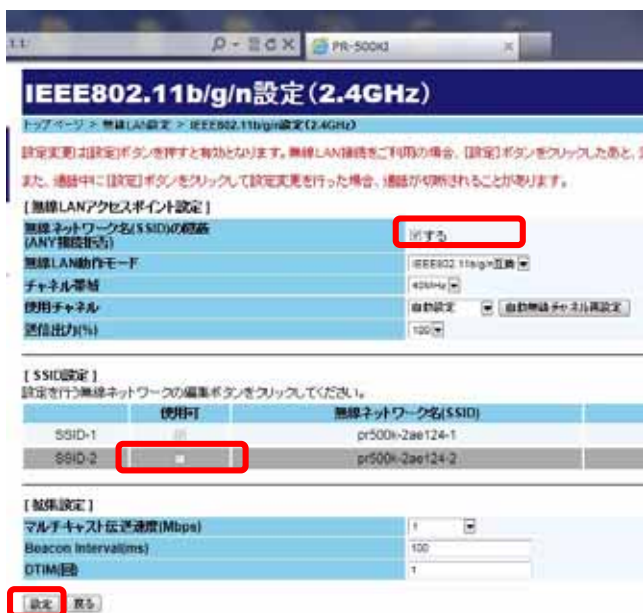

2. 「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽」にチェックを入れ、「SSID-2」を外します。

「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽」にチェックを入れ、中央にある「SSID 設定」で「SSID-2」の「使用可」のチェックを外して下の「設定」をクリックします。

2. MAC アドレスフィルタリングの設定をする



1. 「IEEE802.11b/g/n 設定(2.4GHz)」画面を開きます。


左メニューの「無線 LAN 設定」から「IEEE802.11b/g/n 設定(2.4GHz)」を選択し、「IEEE802.11b/g/n 設定(2.4GHz)」画面を開きます。

本手順書は、2.4GHz を利用の場合を例として記載しています。5GHz を利用の場合は「IEEE802.11ac/n/a 設定(5GHz)」を開いてください。



2. 「無線 LAN 設定(SSID-1)」画面を開きます。

「IEEE802.11b/g/n 設定(2.4GHz)」画面の中央にある「SSID 設定」項目の "SSID-1" の右側にある「編集」をクリックして、「無線 LAN 設定(SSID-1)」画面を開きます。

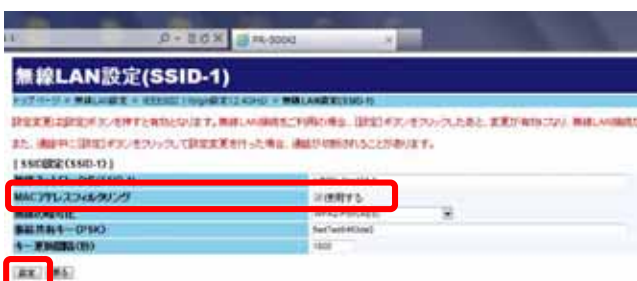


3. 「MAC アドレスフィルタリング」の「使用する」にチェックを入れます。

右側にある「MAC アドレスフィルタリング」の「使用する」にチェックを入れて下の「設定」をクリックします。



4. 「MAC アドレスフィルタリング」画面を開きます。

左メニューの「無線 LAN 設定」から「MAC アドレスフィルタリング」を選択します。

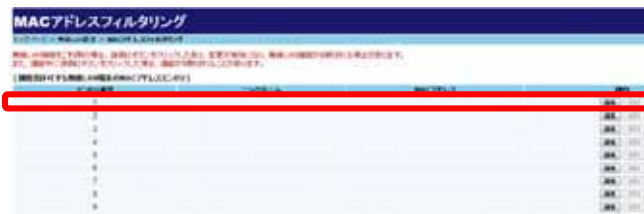

5. 「MAC アドレスフィルタリング エントリ編集」画面を開きます。


エントリ番号を選び「編集」ボタンをクリックし、「MAC アドレスフィルタリング エントリ編集」画面を開きます。



6. 「MAC アドレス(指定)」で接続を許可する端末の MAC アドレスを入力します。

「MAC アドレス(指定)」で接続を許可する端末の MAC アドレスを入力し、下の「設定」をクリックします。


端末の MAC アドレスが不明な場合は、P8「端末の MAC アドレスの調査方法」をご参照ください。

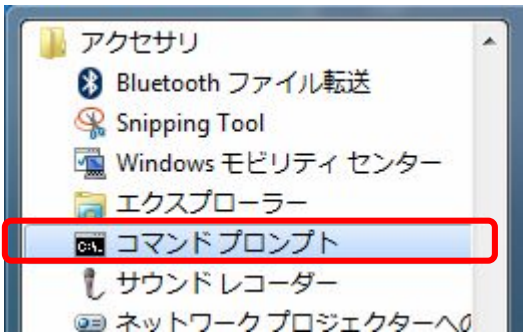

端末の MAC アドレスの調査方法 (Windows7 の場合)

デスクトップから [スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンド プロンプト] を選択します。

[コマンドプロンプト] が見つからないときは、 [スタート] - [プログラムとファイルの検索] で、 "cmd" と入力し実行します。

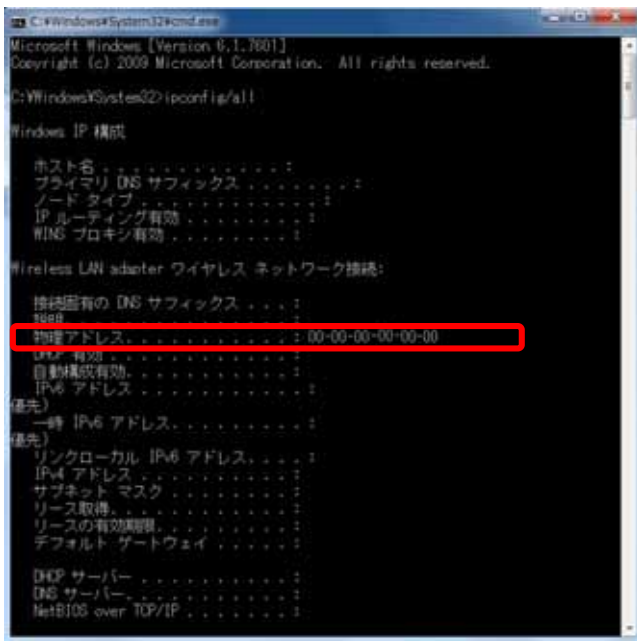

[コマンドプロンプト] 画面が表示されるので "ipconfig /all" と入力し、 [ENTER] キーを押します。

ここに表示された「Wireless LAN adapter ワイヤレス ネットワーク接続」の「物理アドレス」の値が MAC アドレスです。


3. 《推奨する設定》 DHCP 機能を OFF にする

ここで説明する手順は、ガイドラインで規定されている項目以外で、より安全にご利用いただくために推奨している手順です。



1. 「DHCPv4 サーバ設定」画面を開きます。

左メニューの「詳細設定」から「DHCPv4 サーバ設定」を選択し、「DHCPv4 サーバ設定」画面を開きます。

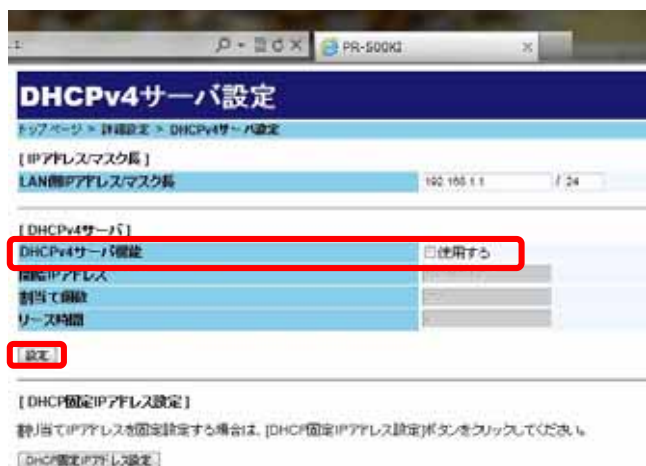


2. 「DHCPv4 サーバ機能」の「使用する」チェックを外します。

「DHCPv4 サーバ機能」の「使用する」チェックを外して、下の「設定」をクリックします。DHCPv4 サーバ機能を外した後に接続できなくなった場合は、P10の「TCP/IP の設定方法」を行ってください。

TCP/IP の設定方法


1. デスクトップから [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークと共有センター] を選択します。

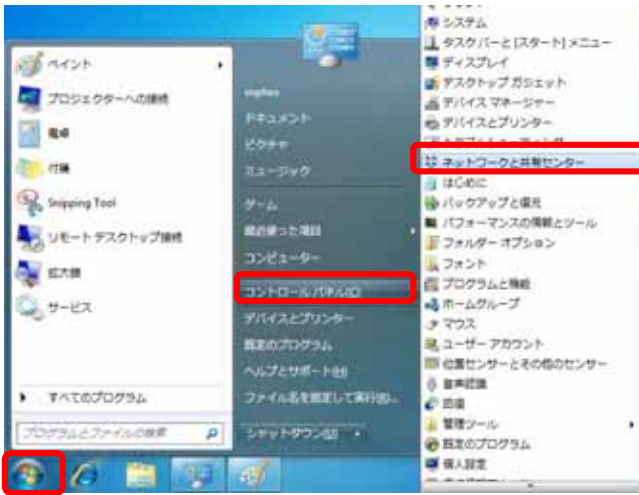


2. [ローカルエリア接続]をクリックします。




3. [プロパティ]をクリックします。

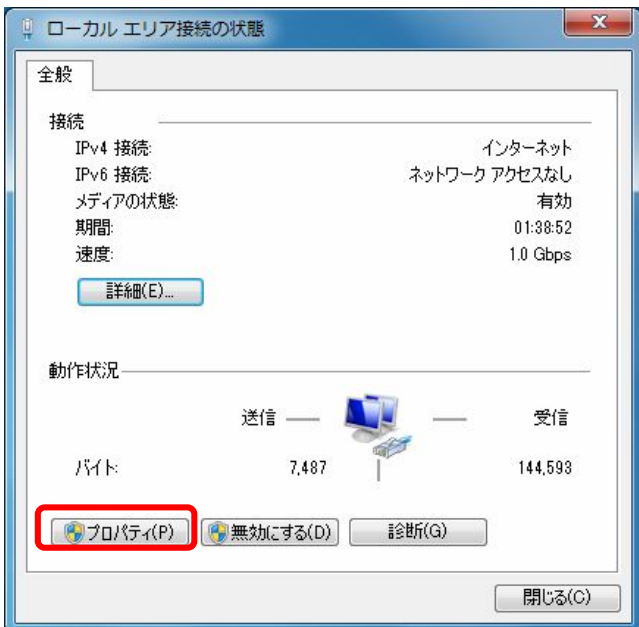

3. 《推奨する設定》 DHCP 機能を OFF にする

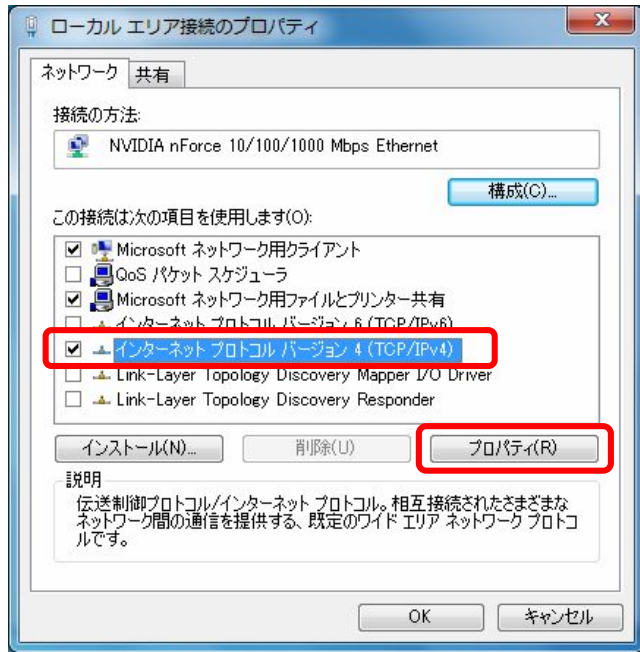

4.[インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。

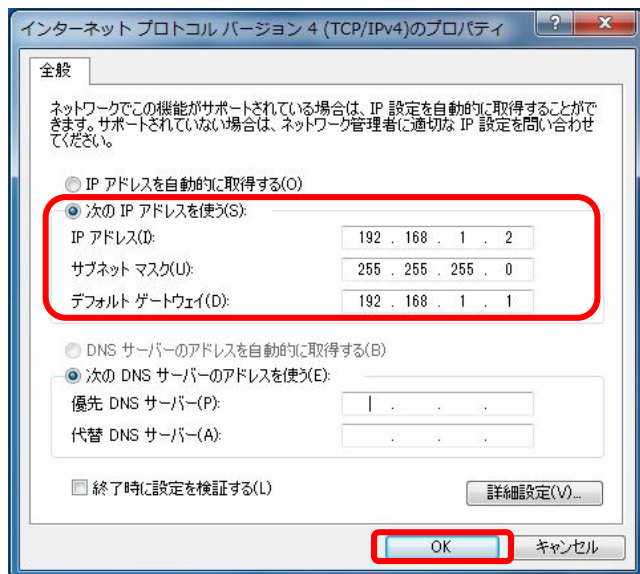

5.「次の IP アドレスを使う(S)」にチェックを入れて、以下の数値を入力し、「OK」をクリックします。

「IP アドレス(I)」 “ 192.168.1. ”

(は、2~253 の中から適当な数字を入力してください。)

「サブネットマスク(U)」 “ 255.255.255.0 ”

「デフォルトゲートウェイ(D)」 “ 192.168.1.1 ”

4. 《推奨する設定》 SSID を変更する



1. 「IEEE802.11b/g/n 設定(2.4GHz)」画面を開きます。

左メニューの「無線 LAN 設定」から「IEEE802.11b/g/n 設定(2.4GHz)」を選択し、「IEEE802.11b/g/n 設定(2.4GHz)」画面を開きます。

本手順書は、2.4GHz を利用の場合を例として記載しています。5GHz を利用の場合は「IEEE802.11ac/n/a 設定(5GHz)」を開いてください。



2. 「無線 LAN 設定(SSID-1)」画面を開きます。

中央にある「SSID 設定」項目の "SSID-1" の右側にある「編集」をクリックし、「無線 LAN 設定(SSID-1)」画面を開きます。



3. 「無線ネットワーク名(SSID-1)」を任意の値に変更します。

「無線ネットワーク名(SSID-1)」を任意の値に変更し、設定をクリックします。

半角英数字で設定してください。

自分の名前やメーカー名等、他者から推測しやすい値は避けましょう。

5. 《推奨する設定》 SSID のパスワードを設定する



1. 「IEEE802.11b/g/n 設定(2.4GHz)」画面を開きます。

左メニューの「無線 LAN 設定」から「IEEE802.11b/g/n 設定(2.4GHz)」を選択し、「IEEE802.11b/g/n 設定(2.4GHz)」画面を開きます。

本手順書は、2.4GHz を利用の場合を例として記載しています。5GHz を利用の場合は「IEEE802.11ac/n/a 設定(5GHz)」を開いてください。



2. 「無線 LAN 設定(SSID-1)」画面を開きます。

中央にある「SSID 設定」項目の "SSID-1" の右側にある「編集」をクリックして、「無線 LAN 設定(SSID-1)」画面を開きます。



3. 「事前共有キー(PSK)」を任意の値に変更します。

「無線の暗号化」が「WPA2-PSK(AES)」になっていることを確認して下の「設定」をクリックします。

半角英数字で設定してください。